

Konectom

Instruções de uso

March, 2023

Março de 2023

Portuguese (BR) - Rev. 2.0


Português (PT-BR) - Rev. 2.0

Vamos começar

Dependendo do seu estudo, será solicitado que você use Konectom em seu telefone pessoal ou no telefone do estudo.

Como baixar o aplicativo em meu telefone pessoal?

Use este código QR

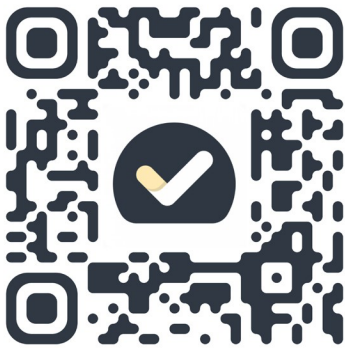


Ou diretamente da loja

- 1 Abra a Play Store (Android) ou a App Store (iOS)
- 2 Encontre o Konectom
- 3 Em seguida, pressione "Instalar" (Android) ou "Obter" (iOS)
- 4 Se solicitado, faça login na App Store ou Play Store para concluir a instalação

Como usar meu iPhone dedicado ao estudo?


Desbloquear o telefone

- 1 Pressione o botão lateral
- 2 Deslize para cima a partir da parte inferior da tela
- 3 Digite a senha

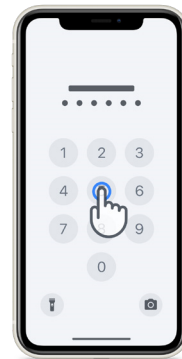


Abrir o aplicativo

toque no ícone

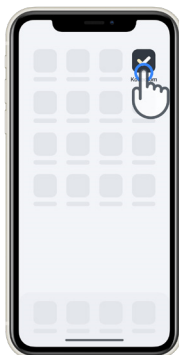


Bloquear o telephone

pressione o botão lateral

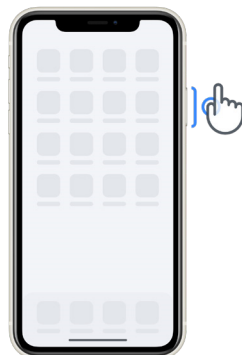


Ajustar o volume

pressione os botões
do lado esquerdo

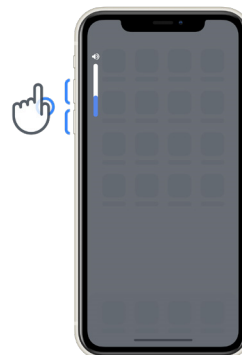

Certifique-se de carregar o iPhone regularmente e ter bateria suficiente antes de realizar as atividades.

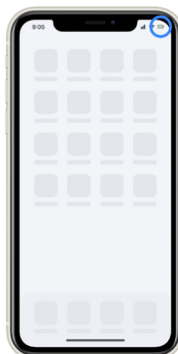

O que é o Konectom?

Konectom é um aplicativo para smartphone que contém várias atividades que você pode realizar sozinho.

Por que usar o Konectom?


A tecnologia móvel tem um grande potencial para melhorar a forma como os profissionais da saúde avaliam as funções neurológicas e prestam cuidados. Ao usar o Konectom, você ajudará os profissionais da saúde e pesquisadores a analisar essa potencial avaliação. Obrigado por usar o aplicativo!

Advertências e precauções

- 1 Realize as atividades em um ambiente seguro e silencioso, sem distrações.
- 2 Certifique-se de ter espaço suficiente, escolha uma superfície plana e livre de obstruções para prevenir um cansaço desnecessário ou risco de ferimento durante as atividades de Equilíbrio e Retorno e Caminhada diária.
- 3 Se estiver usando um cinto de corrida para algum teste, certifique-se de que o telefone esteja colocado com segurança na parte inferior das costas antes de começar.
- 4 Observe que antes de iniciar a atividade de Caminhada diária, o acesso ao GPS do smartphone deve ser autorizado.
- 5 Se você sentir algum desconforto ao realizar os testes, interrompa a atividade imediatamente e consulte o médico do estudo clínico.
- 6 Não use o Konectom enquanto realiza outras atividades (por exemplo, ao dirigir, conversar com outras pessoas) ou em um ambiente barulhento (por exemplo, trens, restaurantes).
- 7 Não realize as atividades antes de entender as instruções.
- 8 Não peça a parentes ou amigos para experimentar o aplicativo e realizar as atividades no Konectom, pois isso pode afetar os dados coletados.
- 9 O Konectom não fornece recomendações ou conclusões relacionadas a diagnóstico ou tratamento.

Atividades do Konectom

Dependendo do seu protocolo do estudo, talvez não seja solicitado que você realize todas as atividades abaixo:

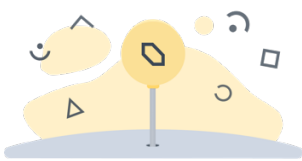

Símbolos e números

Mede sua capacidade de processar informações. Você é solicitado a corresponder, o mais rápido possível, símbolos e números de acordo com as informações fornecidas na atividade.



Pinçar balões

Mede sua capacidade de segurar pequenos objetos com os dedos. Você precisará pinçar o máximo de balões que puder por 30 segundos.



Desenhe uma forma

Mede sua capacidade de mover o dedo indicador com rapidez e precisão. Você é solicitado a desenhar um conjunto de formas em seu smartphone com a maior rapidez e precisão possível.



Equilíbrio e Retorno

Mede sua capacidade de se equilibrar e fazer retornos em U. Para o equilíbrio, você é solicitado a ficar parado por 30 segundos. No retorno, você é solicitado a caminhar 5 graus e fazer um retorno em U completo pelo menos 5 vezes.



Caminhada diária

Mede sua capacidade de caminhar por um longo período. Você é solicitado a caminhar ao ar livre com seu smartphone o mais rápido e o mais longe possível por 6 minutos.



Pesquisas

Você é solicitado a responder a pesquisas e questionários para entender a percepção da sua saúde.

Konectom™

O Konectom™ destina-se ao uso como uma ferramenta de autoavaliação para quantificar objetivamente as funções motora e cognitiva, bem como seu comprometimento associado à esclerose múltipla (EM).

Konectom™ não fornece recomendações ou conclusões relacionadas ao diagnóstico ou tratamento.

Uso operacional


1

Modo de demonstração


O modo de demonstração pode ser usado para demonstrar o uso do Konectom sem coletar dados e sem limitação no número de testes executados. Ele pode ser acessado enquanto o usuário ainda não estiver conectado ao Konectom.


Este modo pode ser usado pela equipe do profissional da saúde para demonstrar como usar o Konectom.


Para iniciar uma atividade, deslize para a esquerda ou para a direita para escolher uma das atividades propostas.

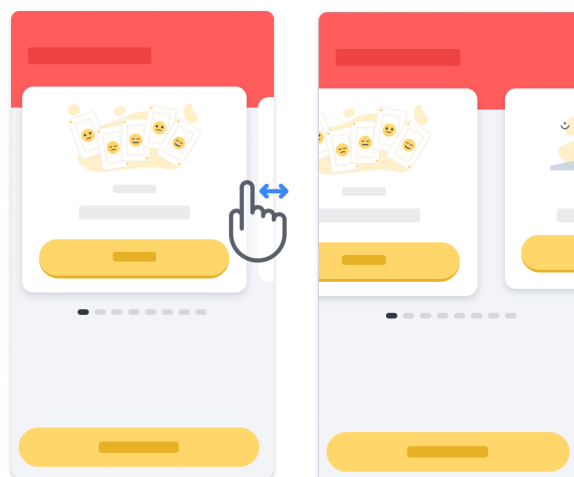

Em seguida, clique no botão Iniciar, em amarelo, para dar início.

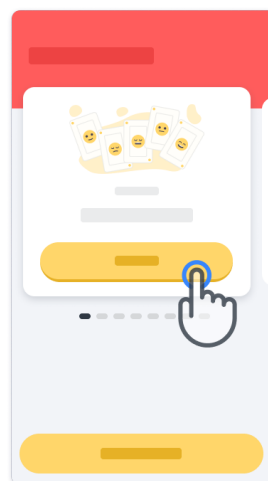


Você será guiado ao longo das instruções de uma atividade e ao longo da prática antes de realizar a atividade em si. Você pode sair da atividade a qualquer momento usando o botão Sair .

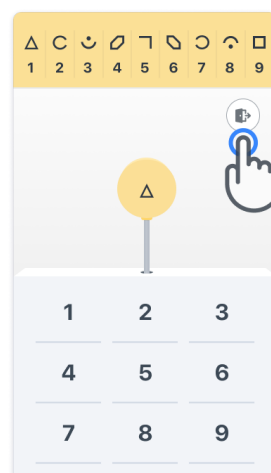

2

Fazer login


No Modo de demonstração, clique no botão amarelo de Login na parte inferior da tela. Use a identificação do paciente e o código de ativação fornecidos pelo profissional da saúde para fazer login. Suas credenciais estão localizadas no Cartão de credenciais impresso, fornecido a você pelo profissional da saúde durante sua integração ao aplicativo Konectom. Você também pode encontrar neste cartão o contato do pesquisador do estudo.

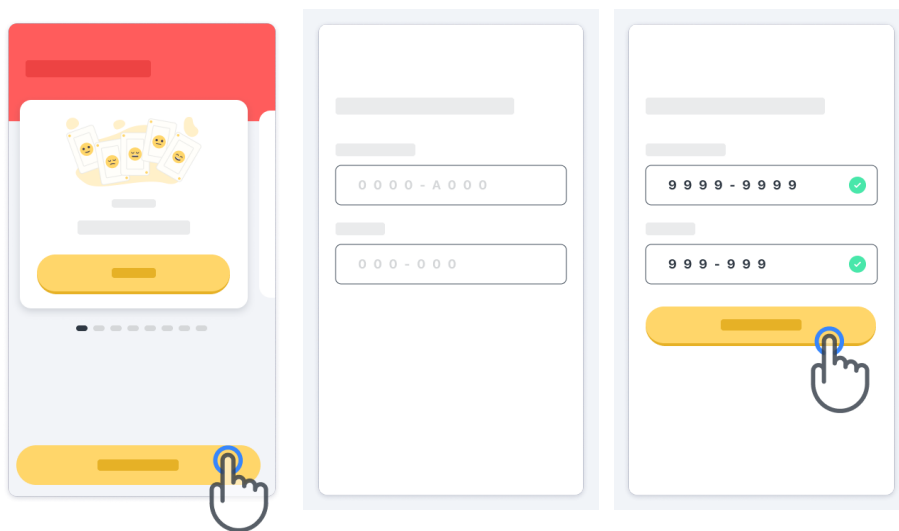

3

Usando a página inicial

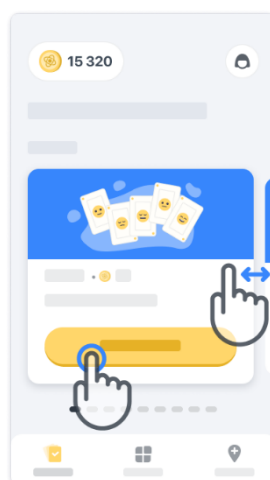

O carrossel de atividades na página inicial pode ser usado para selecionar a atividade a ser executada deslizando para a esquerda ou para a direita. Inicie a atividade com o botão Iniciar do cartão de atividade.




4

Perform the activity


Na primeira vez que você selecionar a atividade, você passará pelas orientações da atividade e terá a possibilidade de realizar o passo a passo de uma atividade como prática antes de executar a atividade real.

Depois que a atividade for realizada, você pode optar por voltar para a página inicial  ou iniciar outra atividade .

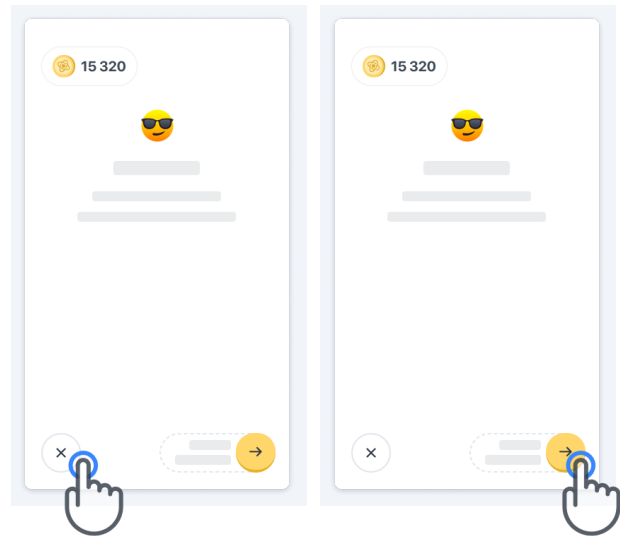

Observe que a prática passo a passo está disponível no aplicativo para as primeiras execuções das atividades. Para poder realizar a prática em outro momento, o usuário deve fazer logout e login usando as mesmas credenciais fornecidas.

Depois que as atividades forem concluídas, elas serão listadas na seção "Concluído" da página inicial.

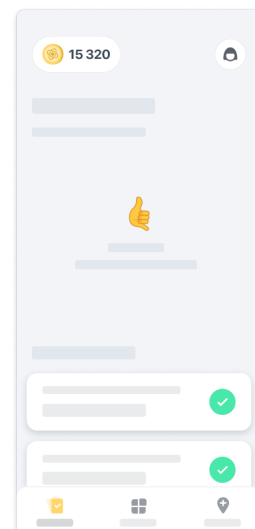


5

Praticar atividades de Equilíbrio e Retorno e Caminhada diária

Durante as atividades de Equilíbrio e Retorno e Caminhada diária, você pode colocar o celular em um cinto de corrida posicionado no centro da parte inferior das costas ou no seu bolso, se não tiver um cinto de corrida.

Você pode usar um dispositivo de assistência e/ou ortóptico conforme necessário.

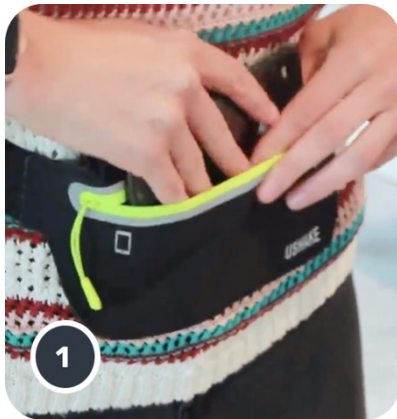

Primeiro, coloque o cinto de corrida em volta da cintura, coloque o smartphone e feche o zíper.




Em seguida, deslize o cinto de corrida ao redor da cintura para que o smartphone fique centralizado na parte inferior

6


Acessando o modo Na clínica

O modo Na clínica está disponível somente para profissionais da saúde.

Os profissionais da saúde podem acessar o modo Na clínica na barra de menu da página inicial. É necessário um código específico para fazer login.

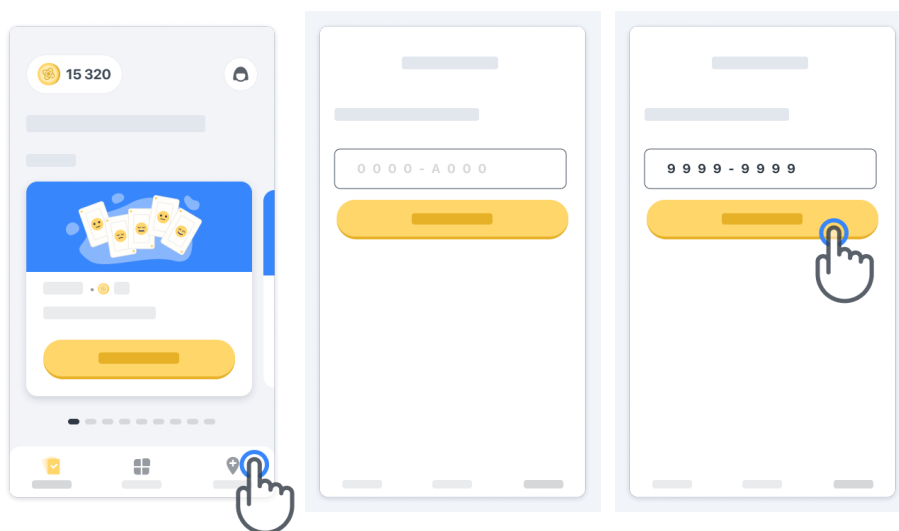

Para sair do modo Na clínica, basta selecionar outro item na barra de menus.

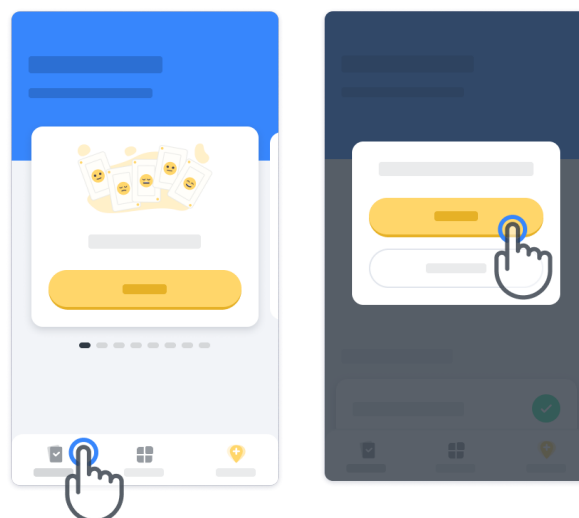


7

Entendendo os pontos

No canto superior esquerdo da página inicial, você verá um contador de pontos. Esses pontos são chamados de *pontos de ciência*.

Sempre que concluir uma atividade, você receberá alguns pontos de ciência.

Eles representam sua contribuição para a pesquisa científica graças à sua participação no estudo. Os pontos de ciência não se baseiam no seu desempenho, mas apenas na sua capacidade de concluir o teste.

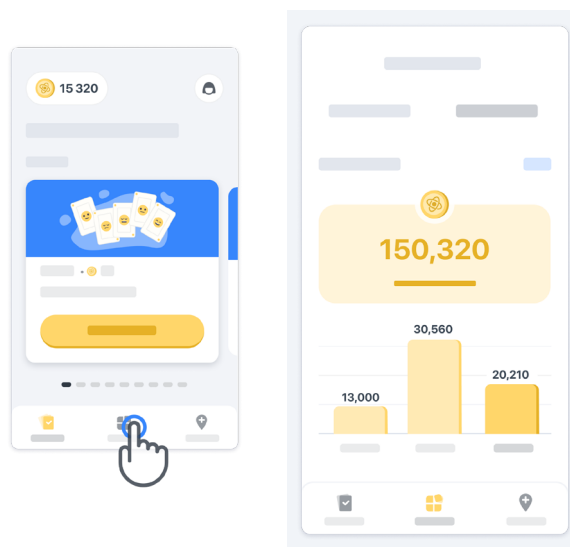




8


Personalizando seu aplicativo

Você pode personalizar seu aplicativo com seu apelido clicando em «Seu apelido» na página inicial. Você pode alterá-lo a qualquer momento na página do seu Perfil. Observação: Essas informações são armazenadas apenas no seu smartphone e não podemos acessá-las.

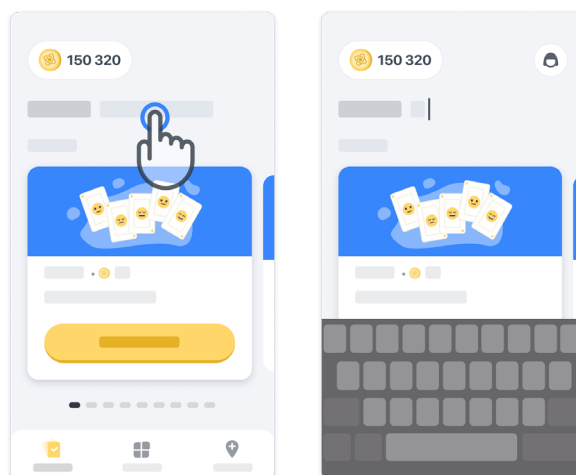Clique no espaço reservado
"Seu apelido" para editá-lo, depois
clique em qualquer lugar na página
inicial para salvar e fechar o teclado.




Você pode editá-lo a qualquer
momento durante o estudo clicando
no ícone de perfil  e, em seguida,
no botão Editar .

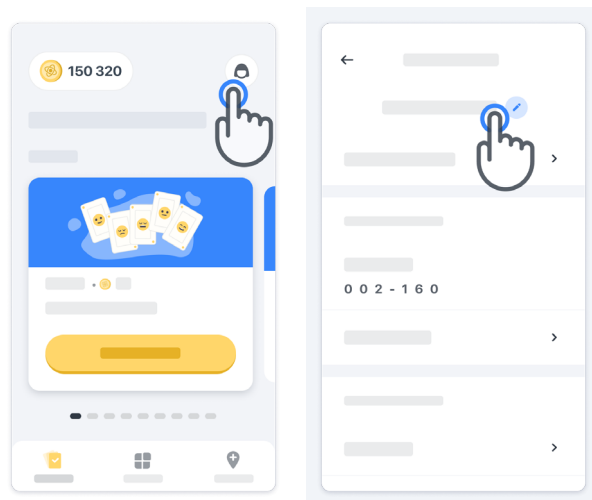


9

Obtendo respostas para suas perguntas

Durante o estudo, você pode ter dúvidas sobre o Konectom ou sobre um problema técnico. Observe que você pode encontrar muitas informações na seção de Ajuda do seu Perfil.

Você pode acessar a seção de Ajuda clicando no ícone de Perfil .

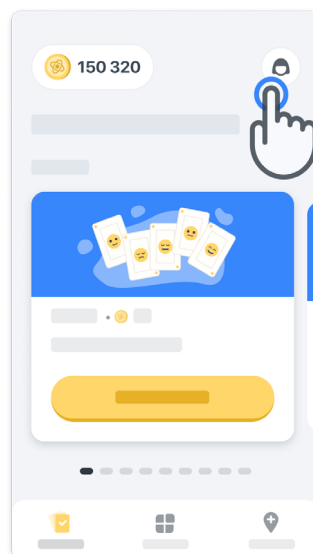

Se quiser relatar qualquer problema técnico ou feedback sobre o aplicativo, você pode usar o formulário em “Fale conosco” (este recurso não está disponível para todos os usuários).

Se esta seção não estiver disponível para você, entre em contato com o coordenador do estudo.

10

Permanecendo conectado


Os dados do Konectom são transferidos automaticamente para o servidor quando a conexão com a internet estiver disponível.

Você pode concluir as atividades do Konectom off-line, mas é altamente recomendável permanecer on-line.

Se um banner vermelho for exibido na parte superior da tela, significa que você precisa conectar seu celular à internet.

Primeiro, verifique se o modo de voo não está ativo  e se o modo de WiFi está ativo .


Caso sua conexão WiFi não funcione corretamente, verifique se a conexão do celular está LIGADA.

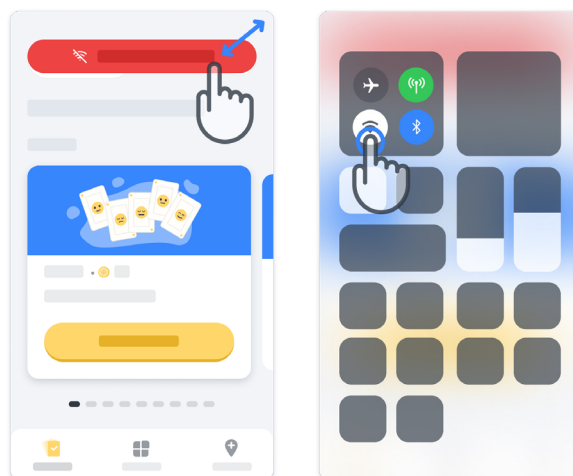

11

Mantendo o aplicativo atualizado

Às vezes, uma versão mais recente do aplicativo pode estar pronta para você. Quando você vir esta tela, certifique-se de ter uma boa conexão com a internet e atualize seu aplicativo.


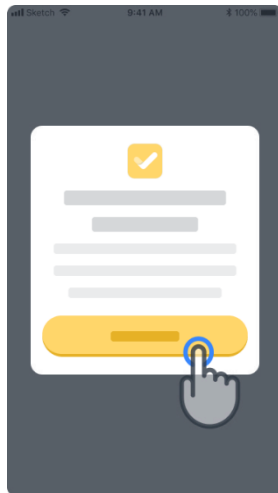


12

Sair

O usuário pode sair do Konectom indo para a seção de Perfil. Para acessar a seção de Perfil, clique no botão Perfil localizado na parte superior direita da página inicial. Quando o usuário estiver na seção de Perfil, role a página para baixo para ver o botão Logout.

Observe que o botão Logout não está disponível para todos os usuários.

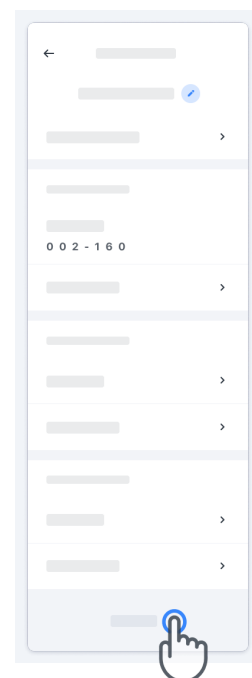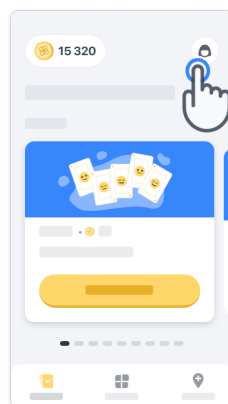

Exigências de hardware

Aplicativo Konectom

O aplicativo móvel Konectom deve ser instalado em um smartphone que tenha acesso à Internet/WiFi (necessário para baixar e atualizar o aplicativo e para carregar dados apenas para o servidor), armazenamento suficiente disponível e uma fonte de alimentação adequada para uso.

O aplicativo móvel Konectom deve ser usado nos seguintes smartphones comercialmente disponíveis:

- iPhone com pelo menos versão iOS 13 ou superior
- Smartphone com Android com pelo menos versão 8.0 ou superior.
- Hardware de smartphone, incluindo sensores IMU (Inertial Measurement Unit [Unidade de Medição Inercial]) e GPS (Global Positioning System [Sistema de Posicionamento Global]), conforme originalmente configurado de fábrica.

Contato

Fabricante legal

Biogen Digital Health Inc.
225 Binney St, Cambridge,
MA 02142, USA

Se você estiver usando o Konectom em países Estados-Membros da União Europeia, observe que qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante ou representante autorizado europeu e à autoridade competente do Estado-Membro em que o usuário e/ou paciente está estabelecido.

Se estiver usando Konectom na Suíça, observe que qualquer incidente sério que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser relatado ao fabricante ou representante autorizado suíço e à autoridade competente na Suíça.

Símbolos

Se estiver usando Konectom fora da UE, Suíça ou Reino Unido consulte os elementos de rotulagem abaixo:



Consulte as Instruções de uso eletrônicas



Informações do fabricante



Data de fabricação
Data de lançamento do software


Se estiver usando o Konectom nos países membros da União Europeia, Suíça ou Reino Unido consulte os elementos de rotulagem abaixo:



Consulte as Instruções de uso eletrônicas



Informações do fabricante

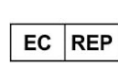

Informações do representante autorizado europeu



Informações do Representante Autorizado Suíço



Data de fabricação
Data de lançamento do software



Marcação CE



Identificador exclusivo do dispositivo



Dispositivos médicos na União Europeia



European Union Importer
MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands



Swiss Importer
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

Biogen Digital Health, Inc (Licenciante) é a fabricante legal do Konectom (Software). O Software é um dispositivo médico com a marcação CE. A Licenciante nomeou a MedEnvoy Global B.V. (Licenciada) como importadora do Software, de acordo com o Regulamento de dispositivos médicos (UE) 2017/745 e quaisquer outras leis e regulamentos aplicáveis. A Licenciante concedeu uma licença à Licenciada para disponibilizar o Software somente no contexto de estudos clínicos. De acordo com esta Licença, a Licenciada tem o direito de sublicenciar o Software gratuitamente para pacientes incluídos em estudos clínicos nos quais o Software está sendo usado, de acordo com seu uso pretendido. Nada nesta Licença será interpretado como cessão ou transferência de qualquer propriedade ou outros direitos de propriedade intelectual da Licenciante para a Licenciada.

Obrigado !

por fazer parte da Aventura Konectom

